


PIERWSZA POMOC | PŁUKANIE OCZU | PLASTRY | MATERIAŁY OPATRUNKOWE



Płukanka do oczu | Pierwsza pomoc dla oczu

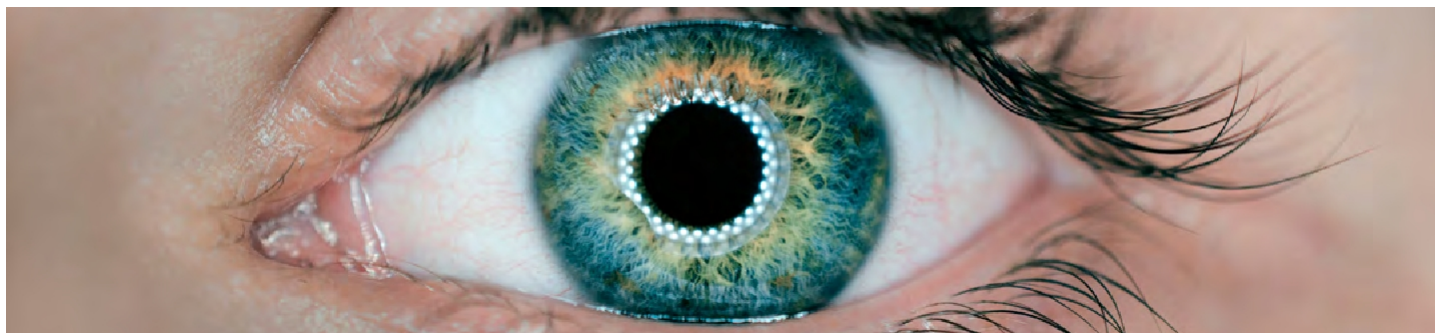

Liczy się każda sekunda: Ochrona najważniejszego narządu zmysłu

Czy wiesz, że?

Nasze oko jest arcydziełem natury i najważniejszym narządem zmysłu człowieka. Tylko interakcja wielu małych części w tym wrażliwym narzędziu umożliwia widzenie.

Ponad 90% wszystkich wrażeń zmysłowych jest odbieranych przez oko. To wystarczający powód, aby zwrócić szczególną uwagę na ten narząd zmysłów - i przygotować się na najgorszy scenariusz.

W przypadku zanieczyszczenia ciałami obcymi lub chemikaliami wymagana jest szybka pierwsza pomoc. Jeśli pierwsza pomoc nie zostanie udzielona natychmiast i konsekwentnie w takim przypadku, oko może ulec trwałemu nieodwracalnemu uszkodzeniu. Każdego roku urazy oczu są jednym z najczęstszych wypadków zgłaszanych przez stowarzyszenia zawodowe. **Prewencja i rozważne działanie mają tutaj ogromne znaczenie.**

GRAMM medical oferuje różne rozwiązania, zarówno mobilne, jak i stacjonarne, dostosowane do rodzaju pracy i wielkości przedsiębiorstwa. Różnorodność naszych produktów gwarantuje optymalne rozwiązanie, odpowiednie dla każdego środowiska pracy.

Nasza koncepcja myjki do oczu została opracowana w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł z niej korzystać łatwo i elastycznie - bez pomocy. **Gwarantujemy bezpieczną i prostą aplikację.**

Wszystkie produkty **ACTIONMEDIC® EYE CARE** są testowane i zatwierdzone przez CE i podlegają ścisłej kontroli jakości. Wszystkie produkty są zgodne z normą DIN EN 1515-4 (prysznice do oczu bez podłączenia do wody).

Masz jakieś pytania? Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi.

Zagrożone miejsca pracy

Warsztaty Firmy zajmujące się obróbką metali Przemysł
 Firmy zajmujące się obróbką drewna itp.
 Stocznie i górnictwo
 Ochrona ludności

Wpływ zanieczyszczeń

Ciało obce, np. brud, kurz, płyny itp.

Produkt / efekt płukania oczu

Roztwór chlorku sodu, 0,9%
 → wypłukuje ciała obce z oka

Laboratoria chemiczne
 Firmy chemiczne Przemysł
 Policja,
 wojsko
 Straż pożarna i inne podmioty

Substancje chemiczne, np. kwasy i zasady

Buforowany roztwór do przemywania oczu BioPhos® 74
 → neutralizuje substancje chemiczne w oku i wypłukuje je

Wysokiej jakości butelka do płukania oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE**

Osłona przeciwpylowa

Ergonomicznie ukształtowana muszla oczna



Zawartość: NaCl 0,9% (sterylny)

Opcjonalnie dostępne również w pojedynczych kartonach dla lepszej obsługi → strona 28



Wielojęzyczna etykieta

Opcjonalnie dostępne są również z pojedynczą uszczelką → Więcej informacji na życzenie.



Piktogram aplikacji

Termin przydatności do spożycia 3 lata



Uchwyt ścienny z oczkiem do wszystkich butelek do płukania oczu GRAMM

Przepisy i normy dotyczące butelek do płukania oczu:

Butelki do płukania oczu **GRAMM** posiadają certyfikat CE i są zgodne z normą **DIN EN 15 154-4**. Płuczki do oczu nie wymagają podłączenia do wody i są produktami medycznymi zgodnymi z obowiązującymi wytycznymi i przepisami. **Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy §3: Pracodawca musi zorganizować środki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnić odpowiednie środki w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w firmie.**

Pracownicy muszą używać dostarczonego sprzętu ochrony osobistej.

Rozporządzenie w sprawie miejsca pracy § 39:

W zależności od rodzaju zagrożenia (np. podczas pracy z kwasami i zasadami) należy zapewnić butelki do płukania oczu.

Transport towarów niebezpiecznych:

Obowiązek agencji spedycyjnej wyposażenia każdego przewoźnika towarów niebezpiecznych w apteczkę samochodową zgodnie z DIN 13 164, która jest rozszerzona o butelkę do płukania oczu, okulary ochronne itp.



Roztwór do płukania oczu BioPhos® 74

Płukanie oczu w przypadku chemikaliów w oku - jeszcze delikatniejsze dla oka.

Zalecenie: Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



Nowa formuła:
bez egzogenów
komponenty

Szybka neutralizacja:
dzięki wysokiej pojemności
buforowej

Wielojęzyczna
etykieta: dostępna we
wszystkich językach
europejskich
języki

Szczególnie
delikatny: neutralne pH i
bez
konserwanty



Szczególne zalety



Czy wiesz, że?

Oko jest arcydziełem natury i najważniejszym narządem zmysłu. Tylko interakcja wielu małych części w tym narzędziu sprawia, że WIDZENIE jest możliwe.

Podczas pracy z chemikaliami mogą one dostać się do oczu w postaci substancji stałych, ciekłych lub gazowych. **Dlatego ochrona oczu jest bardzo ważna podczas pracy!** Należy mieć przygotowany **BioPhos® 74** na wypadek sytuacji awaryjnej w celu aby szybko i skutecznie zapobiegać uszkodzeniom oka w przypadku dostania się do niego substancji chemicznych.

BioPhos® 74 działa skutecznie i utrzymuje równowagę elektrolitów komórkowych dzięki wyłącznemu zastosowaniu naturalnych substancji, które podlegają fizjologicznym procesom.

metabolizm, a zwłaszcza odpowiadają pozakomórkowemu stosunkowi sodu do potasu.

Obszary użytkowania

Roztwór do płukania **BioPhos® 74** w butelce 250 ml lub 500 ml jest wszechstronny i stanowi ważną część apteczki pierwszej pomocy np. dla

- Firmy i laboratoria
- Transport towarów niebezpiecznych
- Służby ratunkowe
- Straż pożarna i kontrola katastrof
- Policja i wojsko

BioPhos® 74 jest przydatnym dodatkiem do stacjonarnych myjni do oczu, ponieważ silnie skoncentrowane, żrące i szybko penetrujące substancje chemiczne wymagają szybkiego czasu interwencji, a niebuforowane roztwory płuczące nie są wystarczające, aby zapewnić nieodwracalne zapobieganie uszkodzeniom komórek.

Efekt

Roztwór płuczący BioPhos® 74 neutralizuje natychmiastowo dzięki efektowi buforowania w fizjologicznym zakresie pH 7,4 i jest szczególnie delikatny ze względu na brak jakichkolwiek składników egzogennych, takich jak środki wstępne. Jest dostosowany do pozakomórkowej równowagi elektrolitowej tkanki. Dzięki wysokiej zdolności buforowania **BioPhos® 74** działa szybko po kontakcie oka z kwasami i zasadami. Sterylny roztwór irygacyjny jest gotowy do użycia w poręcznej butelce o pojemności 250 ml lub 500 ml. Zintegrowana ergonomiczna głowica irygacyjna umożliwia prostą i prawidłową aplikację - nawet przez laików i osoby poszkodowane bez pomocy z zewnątrz. Po zastosowaniu **BioPhos® 74** oko należy przepłukać fizjologicznym roztworem chlorku sodu (0,9%)

Przydatne informacje na temat prawidłowego etykietowania roztworów do płukania oczu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i normami dotyczącymi płukania oczu:

Wielojęzyczna etykieta dostępna we wszystkich językach europejskich

Oznakowanie CE i wskazanie centrum monitorowania

Oznaczenie sterylności produktu

Numer artykułu i PZN

Wskazanie producenta lub osoby wprowadzającej produkt do obrotu

Piktogramy ułatwiające bezpieczne płukanie oczu

Określenie numeru partii i trwałości roztworu do przemywania oczu (GRAMM medical: co najmniej 3 lata)

Aplikacja - łatwa i szybka

Nasze płukanki do oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE** z ergonomiczną głowicą płuczącą są bardzo łatwe w użyciu:



1. Wyjąć butelkę ze stacji.



2. Zdejmij osłonę przeciwpływową z butelki z płynem do płukania oczu.



3. Obrócić miszkę do płukania oczu o 180°, aż pęknięcia uszczelniacza.



4. Odchylić do tyłu umieścić przepłukać, jeśli kubek nad okiem nie powinna i spłukać.



5. Odchylić głowę, do przodu i odzież zmoczyć.

Uwaga:

W przypadku wszelkich zabrudzeń oko należy płukać delikatnym i równomiernym strumieniem.

Delikatnie nacisnąć butelkę do płukania oczu podczas procesu płukania. **W przypadku uszkodzenia lub zabrudzenia oczu należy zasięgnąć porady lekarza.**

Płukanie należy kontynuować podczas transportu do lekarza. Nie używać ponownie otwartej butelki (ryzyko zakażenia).

Tutaj na życzenie logo firmy!




PLAN AWARYJNY DLA OCZU

Wpływ zanieczyszczeń	Zalecany roztwór do przemywania oczu	Instrukcje użytkowania	Kontynuować do momentu uzyskania pomocy medycznej
Ciała obce takie jak brud, kurz, odłamki metalu lub drewna	Roztwór chlorku sodu (0,9%)	Plukać oczy do momentu wypłukania ciał obcych.	Przepłukać roztworem chlorku sodu (0,9%)
Kwas	Buforowany roztwór do przemywania oczu BioPhos® 74	Plukać oczy preparatem BioPhos® 74 przez ok. 2,5 minuty, aż do opróżnienia butelki.	Przepłukać roztworem chlorku sodu (0,9%)
Alkalia	Buforowany roztwór do przemywania oczu BioPhos® 74	Plukać oczy preparatem BioPhos® 74 przez ok. 2,5 minuty, aż do opróżnienia butelki.	Przepłukać roztworem chlorku sodu (0,9%)
Inne na przykład spowodowane przez rozpuszczalnik, olej	Roztwór chlorku sodu (0,9%)	Plukać oczy aż do ustąpienia nieprzyjemnego uczucia.	Przepłukać roztworem chlorku sodu (0,9%)



Wyjąć butelkę ze stacji do płukania oczu lub pojemnika na płyn do płukania oczu.

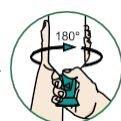

Obrócić muszkę o 180° w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż do zablokowania uszczelnienia.



Odchylić głowę do tyłu i konsekwentnie płucz chore oko.



Pochylić głowę do przodu przed odłożeniem butelki, aby chronić ubranie przed zamoczeniem.



WAŻNE: Płukać oczy zawsze konsekwentnie i ostrożnie, skonsultować się z lekarzem. Dzięki czemu oko będzie szeroko otwarte. Lekko nacisnąć butelkę podczas wypłukania.

W każdym przypadku uszkodzenia oka, zanieczyszczenia, należy natychmiast! Kontynuować płukanie roztworem chlorku sodu (0,9%) aż do udzielania jest porada lekarska.

Butelki z płukanką do oczu



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, odpowiada DIN EN 15 154-4, do wypłukiwania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania stacji i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 500 ml Wymiary: 225 x ø80 mm Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 5 min. Waga: 580 g

Nr art.	Wersja	PU
500.000.05000	Butelka do płukania oczu 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	6 szt.
500.000.51000	Butelka do płukania oczu 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 250 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, odpowiada DIN EN 15 154-4, do wypłukiwania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania stacji i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 250 ml Wymiary: 190 x ø65 mm Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 2,5 min. Waga: 330 g

Nr art.	Wersja	PU
500.000.02500	Butelka do płukania oczu 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	10 szt.
500.300.02500	Butelka do płukania oczu 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczającym BioPhos® 74, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem do płukania buforowanym fosforanami (4,9%), do neutralizacji i płukania chemikaliów z oka, wysoka pojemność buforowa, szczególnie delikatna ze względu na brak składników egzogennych i konserwantów, zgodna z normą DIN EN 15 154-4. Do użytku mobilnego lub do uzupełniania stacji i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 500 ml Wymiary: 225 x ø80 mm Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 5 min. Waga: 580 g neutralne PH

Nr art.	Wersja	PU
500.100.74500	BioPhos® 74 500 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	6 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczającym BioPhos® 74, 250 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem do płukania buforowanym fosforanami (4,9%), do neutralizacji i płukania chemikaliów z oka, wysoka pojemność buforowa, szczególnie delikatna ze względu na brak składników egzogennych i konserwantów, zgodna z normą DIN EN 15 154-4. Do użytku mobilnego lub do napełniania szafki i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową.

Zawartość: 250 ml Wymiary: 190 x ø65 mm Trwałość: > 3 lata
Czas płukania: ok. 2,5 min. Waga: 330 g neutralne PH

Nr art.	Wersja	PU
500.100.74200	BioPhos® 74 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem	10 szt.
500.300.74200	BioPhos® 74 250 ml z nasadką chroniącą przed kurzem w pojedynczym kartonie	12 szt.



Nowa butelka do płukania oczu ACTIOMEDIC TWIN

Umożliwia jednoczesne płukanie obu oczu.



Możliwość dostosowania

Ergonomicznie ukształtowana muszla oczna dla obu oczu.
Idealnie dopasowuje się do oczu i umożliwia
wygodne płukanie.

Jednoczesne płukanie



Podwójny strumień irygacyjny do
jednoczesnego i delikatnego
płukania obu oczu.



Wgłębienie na nos

Szczegółne zalety

W nagłych wypadkach **zaledwie kilka sekund** może zadecydować o **pogorszeniu wzroku**, a w najgorszym przypadku o jego utracie. Jeśli pierwsza pomoc nie zostanie udzielona natychmiast i konsekwentnie w takim przypadku, oko może ulec trwałemu nieodwracalnemu uszkodzeniu.

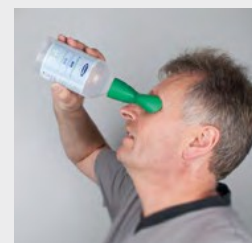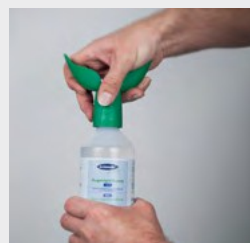

Dlatego też GRAMM medical oferuje ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN płyn do płukania oczu, który może być stosowany do płukania obu oczu jednocześnie w przypadku kontaktu z ciałem obcym.

Dla podwójnego bezpieczeństwa i jeszcze szybszej pomocy w nagłych wypadkach.

Butelki z płukanką do TWIN



ACTIOMEDIC® PIELĘGNACJA TWIN butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu 0,9%, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z roztworem chlorku sodu, do wypłukiwania ciał obcych, np. kurzu, brudu, płynów, zgodna z normą DIN EN 15 154-4, do użytku mobilnego lub do uzupełniania oddziału i walizki, z ergonomiczną głowicą płuczącą do jednoczesnego płukania obu oczu.

Zawartość: 500 ml
Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary:
120 x 80 x 210 mm
Waga: 580 g

Trwałość:
> 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.000.05002	Butelka do płukania oczu z chlorkiem sodu 500 ml TWIN	6 szt.



ACTIOMEDIC® PIELĘGNACJA TWIN butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem płuczającym BioPhos® 74, 500 ml

Sterylna butelka do płukania oczu z buforowanym roztworem do płukania BioPhos® 74, do neutralizacji i płukania chemikaliów z oka, wysoka pojemność buforowa, zgodnie z DIN EN 15 154-4, do użytku mobilnego lub uzupełniania oddziału i obudowy, z ergonomiczną głowicą płuczącą do jednoczesnego płukania obu oczu

Zawartość: 500 ml
Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary:
120 x 80 x 210 mm
Waga: 580 g

Trwałość:
> 3 lata PH
neutralne

Nr art.	Wersja	PU
500.200.74203	Butelka do płukania oczu BioPhos® 74 500 ml TWIN	6 szt.



ACTIOMEDIC® PIELĘGNACJA TWIN Pojedyncza stacja do przemywania oczu I lub II

Stacja do płukania oczu z jedną butelką do montażu na ścianie, butelka gotowa do użycia i sterylna z ergonomiczną głowicą płuczącą TWIN do jednoczesnego płukania obu oczu, z tablicą z piktogramami i lustrem, do łatwej obsługi, z uchwytem, planem awaryjnym dla oczu i materiałem montażowym, w zależności od zastosowania z 500 ml roztworu chlorku sodu lub 500 ml buforowanego roztworu płuczającego BioPhos® 74.

Czas płukania: ok. 2,5 min.

Wymiary: 215 x 80 x 300 mm
Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.200.30010	Stacja do płukania oczu chlorek sodu 500 ml TWIN Single I	1 szt.
500.200.30020	Stacja do płukania oczu BioPhos® 74 500 ml TWIN Single II	1 szt.



Nowa stacja do płukania oczu **ACTIOMEDIC® Medi2Protect**

Dla jeszcze szybszej i skuteczniejszej pomocy w nagłych wypadkach.



Łatwy do uchwycenia
Duży uchwyt ułatwia obsługę nawet w rękawicach w nagłych wypadkach.

**NOW
OŚĆ!**

Woda chroniona



Zalecenie: Zeskanuj kod QR, aby uzyskać więcej informacji.



Zintegrowane lustroko

Podgrzewany
Opcjonalnie dostępna jest również płyta grzewcza.

Okno
Dzięki temu można natychmiast rozpoznać, czy stanowisko do płukania oczu jest napełnione i gotowe do użycia.

Szczegółne zalety

W zagrożonych miejscach pracy, takich jak warsztaty, sklepy metalowe lub laboratoria chemiczne, roztwory do płukania oczu muszą być dostępne zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym miejsca pracy.

§39.

Tutaj **GRAMM medical** oferuje szybko dostępną, solidną i łatwą w obsłudze stację do płukania oczu do montażu na ścianie lub do użytku mobilnego. Wygodna naścienna stacja do płukania oczu oferuje łatwy i szybki dostęp do roztworu do płukania oczu, dzięki czemu w nagłych przypadkach możliwa jest szybka reakcja.

Stacja oferuje miejsce na maksymalnie trzy butelki z płynem do przemywania oczu **ACTIOMEDIC® EYE CARE**, które można dowolnie łączyć.

Kolejną i bardzo ważną zaletą naszej nowej stacji do płukania oczu jest możliwość jej elastycznego wykorzystania. **Zamontowana na ścianie**, stanowi konkretny punkt kontaktowy dla osób poszkodowanych, a dzięki uderzającemu kolorowi sygnału jest łatwa do znalezienia nawet przy ograniczonej widoczności. **Jako mobilna walizka ratunkowa** może być również zabrana w strefę zagrożenia, dzięki czemu w nagłych wypadkach pierwsza pomoc może być udzielona szybko i elastycznie bezpośrednio na miejscu wypadku.

Stacja do płukania oczu Medi2Protect



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect I

Szybko dostępna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub jako mobilna walizka awaryjna, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi z ergonomiczną głowicą płuczącą, z lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca niewiele miejsca, z materiałem montażowym + plan awaryjny dla oczu

Czas płukania: ok. 15 min (łącznie)
Wymiary: 35,5 x 11 x 50 cm

Trwałość > 3 lata Waga:
2,75 kg

Nr art.	Wersja	PU
500.200.20000	Stacja do płukania oczu 2 x 500 ml chlorku sodu 0,9% 1 x 500 ml BioPhos® 74	1 szt.



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect II

Szybko dostępna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub jako mobilna walizka awaryjna, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi z ergonomiczną głowicą płuczącą, z lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca niewiele miejsca, z materiałem montażowym + plan awaryjny dla oczu

Czas płukania: ok. 15 min (łącznie)
Wymiary: 35,5 x 11 x 50 cm

Trwałość > 3 lata Waga:
2,75 kg

Nr art.	Wersja	PU
500.200.20010	Stacja do płukania oczu 3 x 500 ml chlorku sodu 0,9%	1 szt.



500.200.10000



500.200.10010

ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect Augenspülstation

TWIN I lub II

Szybko dostępna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu w kolorze pomarańczowym, do montażu na ścianie lub do użytku jako mobilna walizka awaryjna, z przezroczystym panelem przednim, trzema butelkami gotowymi do użycia i sterylnymi z ergonomiczną głowicą płuczącą TWIN, z lusterkiem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna, wodoodporna i zajmująca niewiele miejsca, z materiałem montażowym + plan awaryjny dla oczu, dostępna w dwóch wersjach

Medi2Protect TWIN I

Zawartość: 2 x 500 ml chlorku sodu 1 x
500 ml BioPhos® 74

Czas płukania: 2,5 minuty na butelkę

Wymiary: 350 x 110 x 500 mm
Waga: 2,75 kg Trwałość: >
3 lata

Medi2Protect TWIN II

Zawartość: 3 x 500 ml Natriumchlorid
Czas płukania: 2,5 min na butelkę

Wymiary: 350 x 110 x 500 mm
Waga: 2,75 kg Trwałość: >
3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.200.10000	Stacja płukania oczu TWIN I	1 szt.
500.200.10010	Stacja do płukania oczu TWIN II	1 szt.

Stacje płukania oczu

ACTIONMEDIC® EYE CARE Design Stacja do przemywania oczu Medidrop I

Optycznie atrakcyjna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu z przezroczystą pokrywą i dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą, z lusterkiem i piktogramem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna i zajmująca mało miejsca, z materiałem montażowym + plan awaryjny dla oczu.

Zawartość: 2 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9

Czas płukania (całkowity): ok. 10 min

Trwałość:> 3 lata

Wymiary: ok. 27 x 10 x 35 cm

Nr art.	Wersja	PU
500.101.10010	2 x 500 ml chlorku sodu 0,9%	1 szt.



ACTIONMEDIC® EYE CARE Design Stacja do płukania oczu Medidrop II

Optycznie atrakcyjna i łatwa w użyciu stacja do płukania oczu z przezroczystą pokrywą i dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą, z lusterkiem i piktogramem ułatwiającym obsługę, pyłoszczelna i zajmująca mało miejsca, z materiałem montażowym + plan awaryjny dla oczu.

Zawartość: 1 x 500 ml roztworu chlorku sodu i 1 x 250 ml buforowanego roztworu płuczającego BioPhos® 74

Czas płukania:

ok. 5 min. chlorek sodu, ok. 2,5

min. BioPhos® 74

Wymiary: ok. 27 x 10 x 35 cm

Trwałość:

> 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.100.10020	1 x 500 ml chlorku sodu 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos® 74	1 szt.



ACTIONMEDIC® Stacja do płukania oczu pojedyncza

Stacja do płukania oczu z jedną butelką do montażu na ścianie, butelka gotowa do użycia i sterylna z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpylową, z tablicą z piktogramami i lusterkiem, do łatwej obsługi, z uchwytem, planem awaryjnym dla oczu i materiałem montażowym, dostępna w dwóch wersjach, w zależności od zastosowania z 500 ml roztworu chlorku sodu lub 250 ml / 500 ml buforowanego roztworu płuczającego Bio-Fos® 74.

Wymiary: ok. 20 x 30 cm

Trwałość:> 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.000.01190	500 ml chlorku sodu 0,9%	1 szt.
500.100.01290	250 ml BioPhos® 74	1 szt.
500.100.01390	500 ml BioPhos® 74	1 szt.





ACTIONMEDIC® EYE CARE Eye Wash Station Double I

Stacja do płukania oczu z dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpływową, w zestawie uchwyt do montażu na ścianie, z lustrem i piktogramem ułatwiającym obsługę, w zestawie materiał montażowy + plan awaryjny dla oczu.
Zawartość: 2 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9

Czas płukania: ok. 10 min (łącznie) Trwałość: > 3 lata Wymiary: ok. 25 x 30 cm

Nr art.	Wersja	PU
500.000.01100	2 x 500 ml roztworu chlorku sodu, 0,9	1 szt.



ACTIONMEDIC® EYE CARE Stacja do płukania oczu Double II

Stacja do płukania oczu z dwiema butelkami do montażu na ścianie, butelki gotowe do użycia i sterylne z ergonomiczną głowicą płuczącą i nasadką przeciwpływową, w tym uchwyt do montażu na ścianie, z lustrem i piktogramem ułatwiającym obsługę, w tym materiał montażowy+ plan awaryjny dla oczu.

Zawartość: 1 x 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9% i

1 x 250 ml buforowanego roztworu płuczającego BioPhos®74

Czas płukania: ok. 5 min chlorek sodu Wymiary: ok. 25 x 30 cm ok. 2,5 min BioPhos® 74 Trwałość: > 3 lata

Nr art.	Wersja	PU
500.100.01150	1 x 500 ml roztworu chlorku sodu, 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos® 74	1 szt.



Torba z paskiem na butelki z płynem do płukania oczu o pojemności 250 ml

Praktyczna saszetka na pasek z zapięciem na rzep i paskami mocującymi do użytku mobilnego, chroni przed zabrudzeniami, można ją łatwo i szybko otworzyć w nagłych wypadkach.

Wymiary: ok. 20 cm x 7 cm Kolor: zielony, z symbolem płukania oczu

Nr art.	Wersja	PU
500.100.64300	Torba z paskiem na butelkę 250 ml / pustą	1 szt.